

REUMO MASSAGE

Congratulazioni per aver scelto REUMO MASSAGE, ci auguriamo che Lei possa trarre beneficio da quest'intenso ma delicato massaggio. E' un tipo di massaggiatore progettato in modo molto evoluto, infatti prevede 8 modalità di massaggio a 6 funzioni che possono essere controllate mediante il comando manuale.

CARATTERISTICHE

1) 8 trasduttori singoli.

REUMO MASSAGE è dotato di 8 trasduttori incorporati che trasmettono benefiche vibrazioni massaggianti a varie parti del corpo: collo, spalle, pancia, fianchi, cosce polpacci. Agendo sul comando manuale, si può scegliere quale zona massaggiare e l'intensità del massaggio, che può variare da bassa, media, alta. Per l'uso corretto del comando manuale, leggere attentamente le "Modalità d'uso".

2) Azione massaggiante mobile.

Il comando manuale consente anche la scelta dell'Azione massaggiante mobile. Premendo il tasto Ciclo (CYCLE), posto nella parte superiore del comando, si avvia un'azione massaggiante che si sposta lungo il corpo, dall'alto verso il basso.

Premendo il tasto "Zone a massaggio mirato" si abilita o si disabilita il massaggio nelle zone desiderate.

Sono disponibili tre velocità: bassa(L), media(M), alta(H). Premendo il tasto Velocità del Ciclo (CYCLE SPEED) si possono scegliere le varie opzioni.

Per maggiori chiarimenti vedere "Modalità d'uso".

3) ADATTATORE UNIVERSALE

REUMO MASSAGE è dotato di un adattatore AC/DC per prese da 120 e 220 Volt, per rispondere alle esigenze di diverse aree geografiche.

Specifiche dell'adattatore:

120 VOLT

Entrata 120V AC 60Hz / Uscita: 12V DC 800 mA.

220 VOLT

Entrata 220V AC 50Hz / Uscita: 12V DC 800 mA.

Sistema a strappo

REUMO MASSAGE ha un sistema speciale di imballaggio che consente di trasportarlo e riporlo facilmente.

Quando l'apparecchio non viene usato staccare sempre la spina, non lasciare mai REUMO MASSAGE collegato alla corrente.

SPEGNIMENTO AUTOMATICO

Per sicurezza e comodità REUMO MASSAGE è programmato per spegnersi dopo 20 minuti di funzionamento. Per riavviare REUMO MASSAGE premere i tasti F1, F2, F3 o uno dei tasti per il massaggio mirato. Se non viene dato alcun comando, REUMO MASSAGE rimarrà inattivo. Bisogna, comunque ricordare, che quando REUMO MASSAGE non viene usato, la corrente va staccata, perché il fatto che esso sia inattivo non significa che sia spento.

ATTENZIONE

1. Se il dolore a muscoli, articolazioni o dovuto ad altro stato fisico persiste, smettere di usare REUMO MASSAGE e consultare il proprio medico.

2. Non usare mai REUMO MASSAGE per più di 20 minuti di seguito. Un uso prolungato provoca surriscaldamento; se ciò dovesse verificarsi interrompere l'uso e attendere che si raffreddi.

3. L'uso di REUMO MASSAGE è vivamente sconsigliato alle persone con pace-maker.

ISTRUZIONI IMPORTANTI

Prima di collegare REUMO MASSAGE alla corrente accertarsi che il comando manuale sia spento ("OFF"). Se quando si accende REUMO MASSAGE, si verificasse qualche interferenza o qualche distorsione, spegnerlo immediatamente. Attendere qualche minuto e riaccenderlo, l'interferenza e la distorsione saranno sparite.

AVVERTENZE IMPORTANTI

- Come qualunque apparecchiatura elettrica, anche REUMO MASSAGE non deve essere messo in alcun modo a contatto dell'acqua.

- Non usare REUMO MASSAGE per dormire.

- Seguire le istruzioni per l'uso.

- Non usare per altri scopi se no quelli per cui è stato progettato.

- Le persone con handicap psichici o fisici devono essere sorvegliate mentre usano REUMO MASSAGE.

- Tenere lontano dalla portata dei bambini.

- Non toccare l'apparecchio se è caduto nell'acqua. Staccare immediatamente la corrente.

- Se REUMO MASSAGE non funziona regolarmente sospendere l'uso. Rivolgersi al venditore per i controlli e le riparazioni.

- Non usare il filo elettrico o il cavo di alimentazione come maniglia di trasporto.

- Non usare REUMO MASSAGE sotto una coperta, ciò potrebbe provocare surriscaldamento, incendio, scariche elettriche e mettere in pericolo la sicurezza fisica.

- Quando l'apparecchio non viene usato, mettere il comando manuale su "OFF" e staccare la corrente elettrica.

- Non mettere il cavo elettrico in prossimità di fonti di calore.

- Non usare mai contemporaneamente ad ossigeno o ad altri prodotti spray.

MODALITA' D'USO

CICLO

Per avviare l'azione massaggiante mobile premere il tasto Ciclo. Dopo aver premuto i tasti per il massaggio mirato (vedere le istruzioni sotto), premendo il tasto Ciclo, si produce un movimento da un punto ad un altro e la vibrazione scorre dall'alto al basso lungo la superficie del materasso. Premere di nuovo il tasto Ciclo per interrompere la funzione. Il LED corrispondente si spegne. La funzione Ciclo dispone di varie opzioni. I LED corrispondenti aiuteranno nella scelta dell'opzione.

TASTI PER IL MASSAGGIO MIRATO

Questi 4 tasti sono destinati a zone specifiche: le spalle, i fianchi, le cosce e i polpacci. Per programmare il massaggio desiderato basta premere il tasto relativo a ciascuna zona. Il LED corrispondente si accenderà.


Per interrompere il massaggio premere nuovamente il tasto, il LED corrispondente si spegnerà.

INTENSITA' DEL MASSAGGIO

Vi sono 3 intensità di massaggio: bassa (L) media (M) Alta (H). I LED corrispondenti indicheranno l'intensità scelta. Per alternare le intensità premere i tasti corrispondenti.


TIPI di MASSAGGIO - F1, F2, F3

F1 - I 4 trasduttori di sinistra vibrano contemporaneamente e quindi si attivano i 4 trasduttori di destra contemporaneamente.

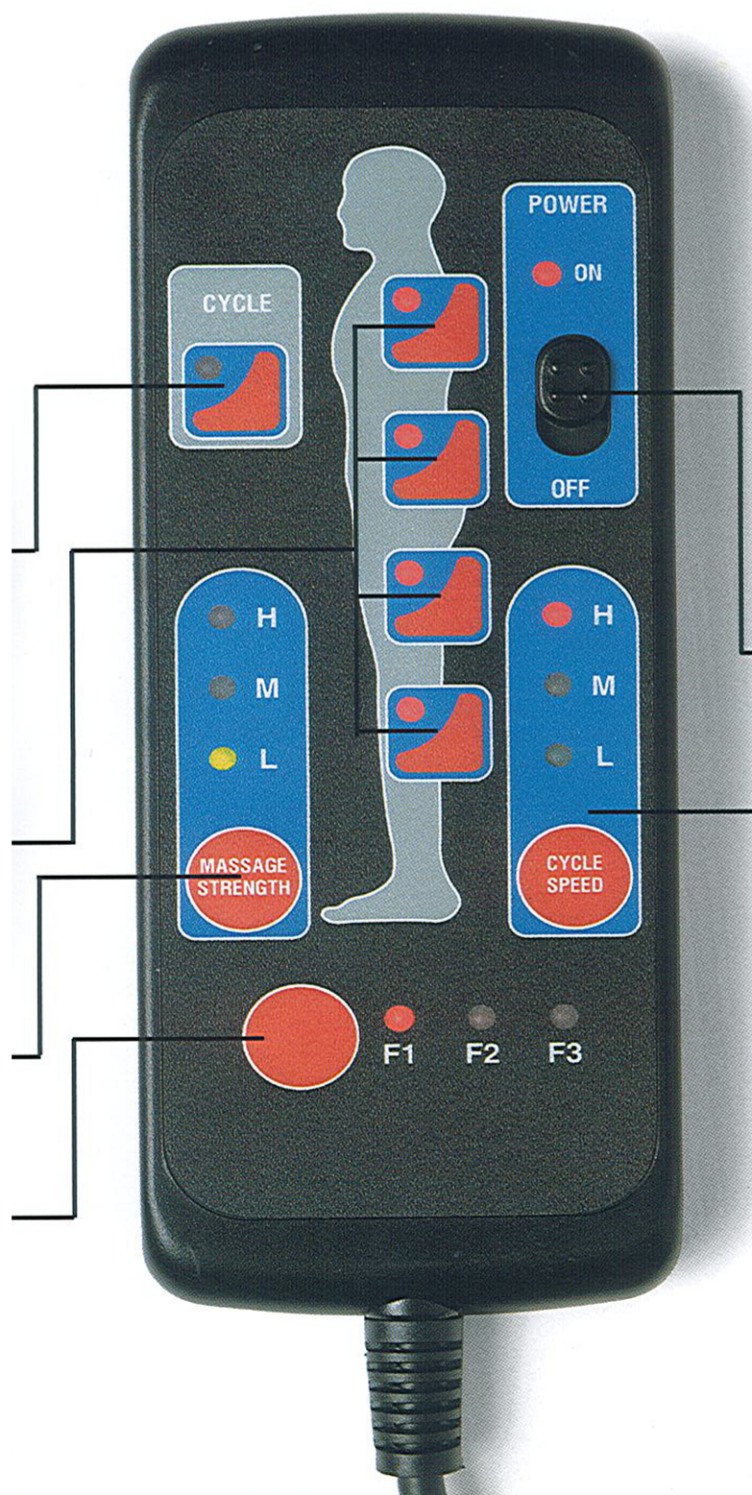

F2 - Azione massaggiante mobile ad N. Si alterna dall'alto al basso e da sinistra a destra.

F3 - Azione massaggiante mobile a Z. Il motore vibra da sinistra a destra mentre esegue un movimento verso il basso.

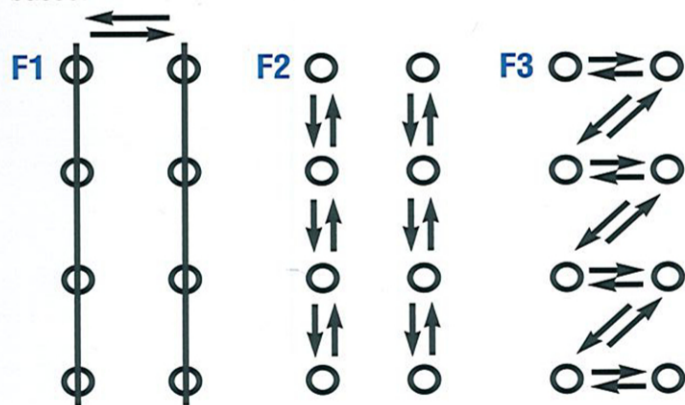

INTERRUTTORE - ACCESO / SPENTO

Prima di collegare la spina alla corrente elettrica mettere L'INTERRUTTORE (POWER) su SPENTO (OFF). Spingere il tasto nero su ACCESO (ON) per avviare l'azione massaggiante.

VELOCITA' DEL CICLO

Il massaggio a ciclo prevede 3 velocità: bassa (L), media (M) alta (H). Scegliere la velocità che si desidera per l'azione massaggiante mobile dall'alto al basso. Il LED corrispondente acceso indicherà la scelta effettuata. Per interrompere la funzione premere nuovamente il tasto.

ALTRE FUNZIONI DI MASSAGGIO

1. Funzionamento contemporaneo degli 8 trasduttori vibranti. Premere i 4 tasti di Massaggio mirato per avviare l'azione massaggiante.

2. Massaggio mirato - Premere un solo tasto relativo alla zona che si desidera massaggiare.

3. Azione massaggiante mobile - Dopo aver premuto il tasto "Massaggio mirato" premere il tasto Ciclo per avviare l'azione massaggiante mobile.

CONSIGLI PER LA MANUTENZIONE

PER RIPORRE

- Piegare REUMO MASSAGE e riporlo in un luogo asciutto e sicuro. Accertarsi che non vi siano oggetti appuntiti nelle vicinanze che possano danneggiare la superficie.

- Non legare ne appendere REUMO MASSAGE usando il filo elettrico o il cavo di alimentazione, ciò potrebbe causare dei seri danni.

CONSIGLI PER LA PULIZIA

- Scollegare l'adattatore e attendere che l'apparecchio si sia raffreddato prima di procedere a qualunque tipo di pulizia.

- Non immergere mai REUMO MASSAGE in un liquido per lavarlo. Usare un panno appena umido o una spugna per pulire la superficie. Evitare qualunque contatto con l'acqua.

- Non usare spazzole, benzina, kerosene, pagliette, solvente per vernici, acqua calda oltre i 48°C.

- Se il cavo elettrico è avvolto distenderlo tenendolo teso per qualche istante.

- Non tentare mai di riparare REUMO MASSAGE da soli.

GARANZIA ANNUALE

REUMO MASSAGE è coperto da garanzia per un anno dalla data di acquisto. Nel periodo di garanzia l'assistenza tecnica è gratuita.

La garanzia copre i difetti di fabbricazione, ma non i danni dovuti ad un cattivo uso, incidenti, interventi sul prodotto da parte dell'utente, collegamento di articoli non consentiti fuori dal controllo del produttore.

The Original
REUMO MASSAGE

Il Massaggio "su misura" per il vostro Benessere