

Spalliera Massaggiante



Ringraziandovi per la scelta di questo eccezionale prodotto prima di utilizzare la "Spalliera Massaggiante" vi chiediamo di leggere attentamente il manuale per un corretto uso.

CONTENUTI:

pag. 3	caratteristiche del prodotto
pag. 4	nome dei componenti
pag. 5	funzioni del telecomando
pag. 6	come adoperare il telecomando
pag. 7e 8	uso dell'apparecchio
pag. 9	specifiche del prodotto
pag. 10	precauzioni
pag. 11	sicurezza
Pag. 12	controindicazioni

Caratteristiche


Un profondo massaggio picchiettato (tapping) che vi aiuterà a distendere le contrazioni donandovi una piacevole sensazione di relax.

Utilizzando questa tipologia di massaggio potrete selezionare 5 modalità di massaggio variando la densità e la velocità secondo le vostre esigenze. Potrete inoltre decidere quale parte del corpo trattare semplicemente facendo scivolare la spalliera sul punto che vorrete massaggiare (collo, spalle, vita, addome, cosce e gambe).


- Il massaggio Tapping su collo e spalle vi aiuterà ad alleviare il dolore muscolare e a distendere i muscoli
- La sua struttura vi permetterà di raggiungere le parti del corpo che vorrete massaggiare
- Dotato di un massaggio confortevole e professionale
- Rilassamento delle fasce muscolari del busto
- Maniglie per posizionare l'apparecchio sulle zone da trattare

Componenti

- 1 corpo massaggiante
- 2 rivestimento PU
- 3 pannello di controllo
- 4 velcro
- 5 presa di alimentazione
- 6 bottone

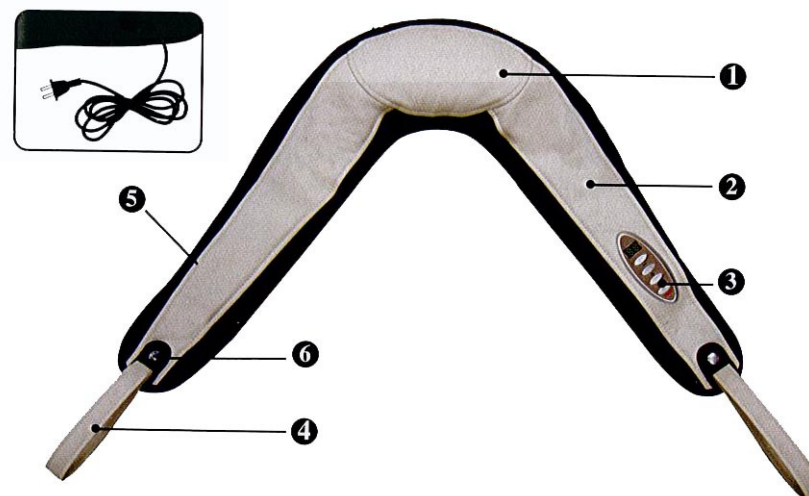

Funzioni del telecomando

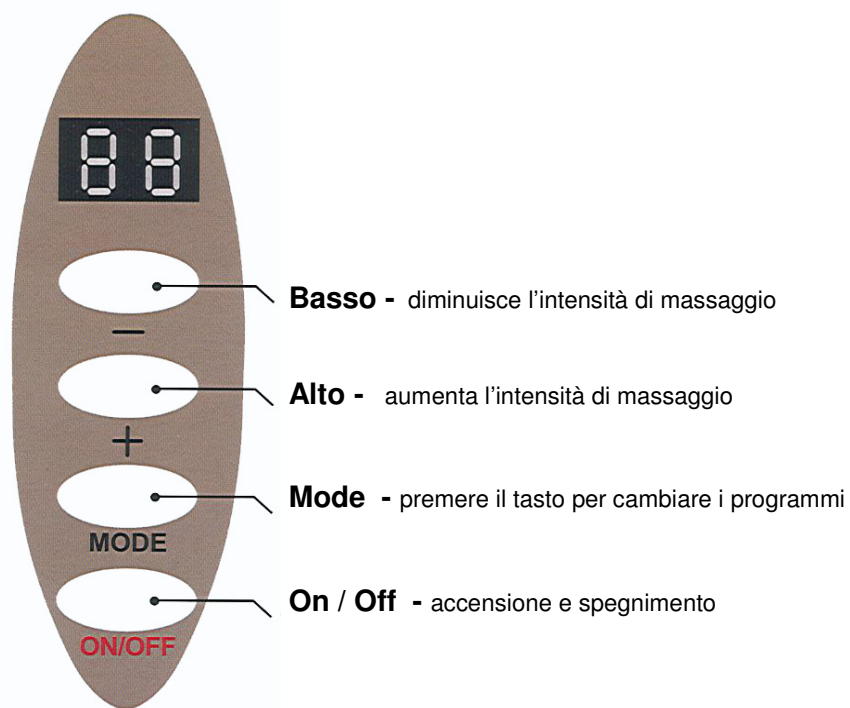

Auto-spegnimento dopo 15 minuti

Utilizzo del telecomando

1. **ON / OFF**

Per accendere e spegnere l'apparecchio

Spegnimento: tenere premuto il tasto per 3 secondi -
scollegare la spina nel caso di inutilizzo

2. **MODE**

Premere il tasto per cambiare la modalità di massaggio da 1 a 5

3. **+ ALTO:** premere il tasto per aumentare l'intensità di massaggio

4. **- BASSO:** premere il tasto per diminuire l'intensità di massaggio

5. **SUONO:**

L'apparecchio emette un suono ogni volta che si connette la presa di corrente e si fa un'operazione

Uso dell'apparecchio

1. Collegare la spina alla presa di corrente
2. Posizionare il massaggiatore sulla zona interessata. Per applicazioni relative alla schiena prendere le maniglie e sistemare la cintura facendola scivolare fino alla posizione ottimale.
3. Per evitare lesioni vi consigliamo di togliere qualsiasi accessorio
4. Premere il tasto Power per iniziare il massaggio e poi il tasto + / - per raggiungere l'intensità desiderata (8 intensità differenti)
5. Il massaggio ha una durata di 15 minuti—per interromperlo tenere premuto il tasto power per 3 secondi (sentirete un suono)

Ogni modalità dura 15 minuti e se vorrete cambiarla il timer ripartirà con la nuova sessione di 15 minuti



Collo e spalle

Per lenire i dolori muscolari




Schiena

Per ridurre i dolori causati da una scorretta postura



Addome

Per rassodare la pancia

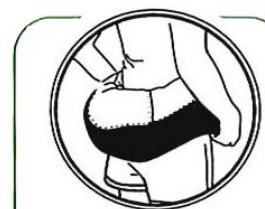

Glutei

Per compattare i glutei



Cosce

Per definire le linee delle cosce



Gambe

Per massaggiare le gambe

Specifiche del prodotto

Nome prodotto Spalliera Massaggiante

Voltaggio AC 220V 50Hz

Auto Timer 15 minuti

Potenza 45W

Misure 151 cm di lunghezza

Materiale PU traspirante

Precauzioni per la sicurezza

Prima dell'utilizzo si prega di leggere attentamente questa guida:

- Non superare i 30 minuti.
- Evitate di utilizzare la spalliera massaggiante subito dopo aver mangiato.
- Evitate il contatto diretto con la vostra pelle.
- Non adoperate l'apparecchio su vestiti umidi.
- Evitate di comprimere l'apparecchio.
- E' consigliabile partire con una sessione a bassa intensità per poi modificarla in un secondo tempo.
- Se avvertite un massaggio troppo vigoroso vi consigliamo di interromperlo.
- Non lasciare l'apparecchio incustodito e alla portata dei bambini.
- Si sconsiglia l'utilizzo in gravidanza.
- E' normale avvertire una sensazione di formicolio dopo il suo uso.
- Evitate l'uso di creme cosmetiche o lozioni durante il trattamento.
- Non manomettere l'apparecchio—in caso di problemi contattare il servizio di assistenza.
- E' importante evitare di utilizzare contemporaneamente apparecchi collegati alla stessa presa di corrente.

CONTROINDICAZIONI:

Si sconsiglia l'uso a chi:

- ◆ Ha problemi cardiaci
- ◆ Ha fratture ossee
- ◆ Dopo aver subito interventi chirurgici
- ◆ In gravidanza o subito dopo il parto
- ◆ In presenza di tumori
- ◆ In caso di osteoporosi
- ◆ Dopo aver subito incidenti o malattie
- ◆ Se si sta seguendo una cura



CE